


Handleiding cMed Plus App




focuscura 

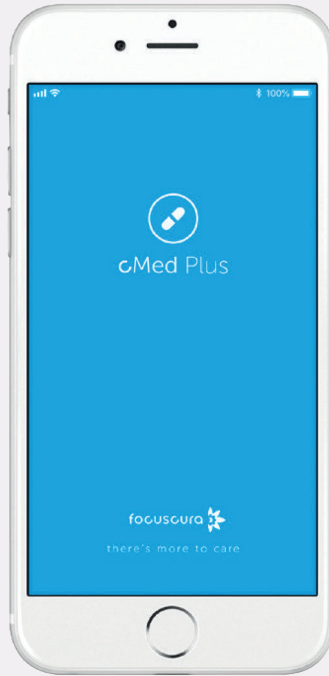

cMed Plus




- 1** Download de cMed Plus App via de App Store of Google Play op uw mobiele apparaat.

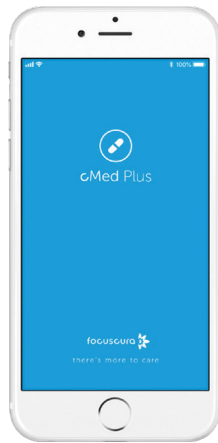

Apple, het Apple-logo en AppStore® zijn handelsmerken van Apple Inc. Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

- 2a** Open de App en maak uw account aan. Voer uw voornaam, achternaam en e-mailadres in

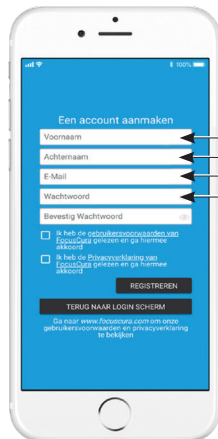

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Wachtwoord


- 2b** Voer een wachtwoord in dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Ten minste acht tekens
2. Ten minste één hoofdletter
3. Ten minste één kleine letter
4. Ten minste één cijfer
5. Ten minste één speciaal teken zoals: ! @ #



Ga akkoord met de voorwaarden en klik op 'Registreren'

- 3** Controleer uw e-mail: De App stuurt een e-mail naar het door u opgegeven adres. Klik op de knop om uw account te bevestigen

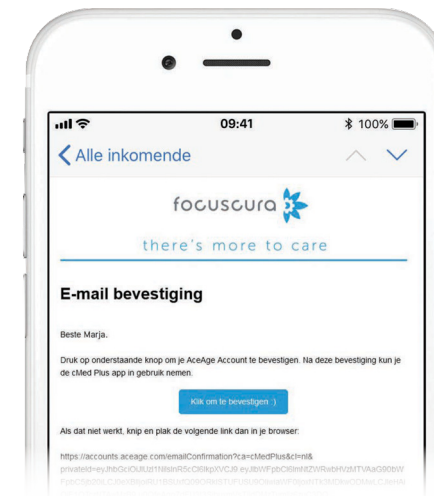



4

ScherM Mijn koppelingen: Druk op de knop TOEVOEGEN (+) in de rechteronderhoek om het koppelen te starten. U moet toegang hebben tot het cMed Plus-apparaat



Knop TOEVOEGEN

5

ScherM cMed Plus koppelen: U kunt een QR-code scannen OF een pincode invoeren wanneer deze door het cMed Plus-apparaat is gegenereerd



Knop cMED PLUS QR-CODE SCANNEN

Veld koppeling pincode

6

Op het cMed Plus-apparaat: Druk in het startscherM op het pictogram INSTELLINGEN in de rechterbovenhoek



Pictogram
INSTELLINGEN

7

Druk in het instellingenscherM van cMed Plus op de knop KOPPELEN MET TOESTEL



Knop KOPPELEN
MET TOESTEL




8

cMed Plus geeft een QR-code en pincode weer. Deze zijn tijdelijk en verlopen na twee minuten



9

Als de tijd voor de codes is verlopen, vraagt cMed Plus u om een nieuwe QR-code en pincode te genereren

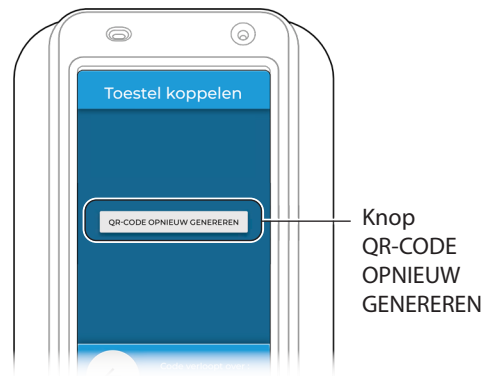

10a

Op uw mobiele apparaat: Druk op cMED PLUS QR-CODE SCANNEN in de App en houd uw apparaat boven cMed Plus om de code te scannen



10b

U kunt ook de pincode invoeren die onder de QR-code staat





11

Selecteer na het koppelen of u de gebruiker van het cMed Plus-apparaat bent of een zorgverlener voor die gebruiker



13

Druk op de knop SCHEMA (📅) van de cMed Plus-gebruiker om het schema voor de doseringen in de huidige cassette te bekijken



12

U ziet de gekoppelde cMed Plus-gebruiker nu in het scherm Mijn koppelingen



14

Druk op de knop MEER (⋮) van de cMed Plus-gebruiker om:

1. Aan te geven welke meldingen u wilt ontvangen
2. Het waarschuwingsvenster in te stellen voor vroege en gemiste doseringen
3. Het telefoonnummer van de cMed Plus-gebruiker in te voeren om rechtstreeks vanuit de app te bellen



